



CONN™ FILL

CONN™ FILL Abfüllnadeln für aseptische Prozesse sind so flexibel wie Ihre Anwendungen. CONN™ FILL Nadeln existieren in verschiedenen Grössen und anpassungsfähigen Design für die im Markt erhältlichen aseptischen Abfüllmaschinen. Die Nadeln sind als Single-use oder zur Mehrfachnutzung verfügbar.

CONN™ FILL für Standardanwendungen

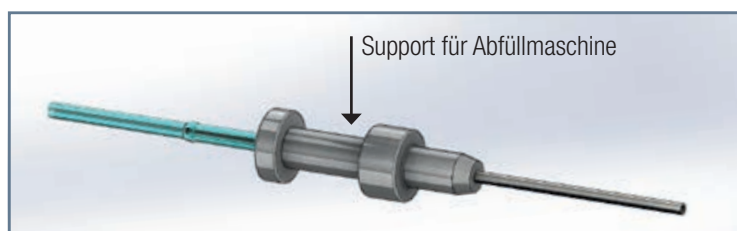

CONN™ FILL mit Zulauf durch Silikonschlauch und Reduktion

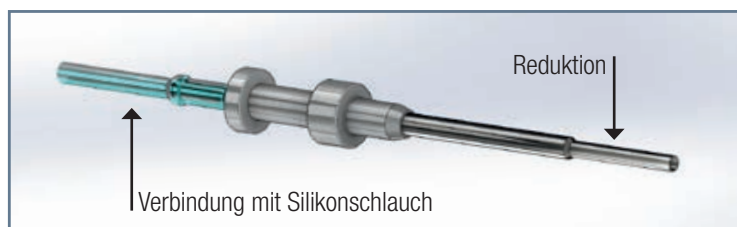


CONN™ FILL für Spezialanwendungen verklebt und mit Zulauf durch PTFE-Schlauch



CONN™ FILL

Abfülllösungen von Connectors für Ihre sterilen Anwendungen.

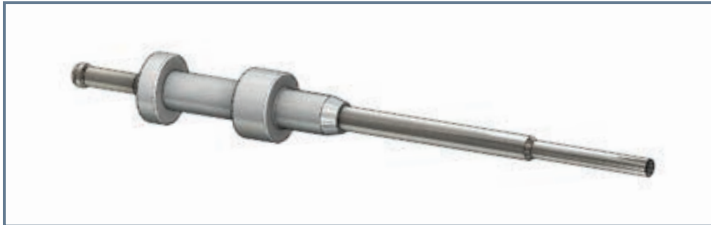

Produktgruppe:	CONN™ FILL Abfüllsysteme
Bezeichnung:	Aseptische Abfüllnadeln
Geltende Normen:	IMA, Bosch, Corima, B+S und andere
Innendurchmesser:	Von Øi0.8mm bis Øi10mm
Schlauchzulauf:	Silikon- oder PTFE-Schlauch
Material:	Support: PVDF oder PEEK
Nadelröhre:	Edelstahl 1.4435 oder 1.4404
Sterilisation:	Autoklavierbar, Gammabestrahlt
Oberflächenbeschaffenheit:	Ra aussen: 0.8µm or 1.6µm Ra innen: 0.6µm or 0.8µm
Kennzeichnung:	Grösse, Material, Batchnummer, Herstellerzeichen
Zertifikate:	Materialzertifikate nach EN 10204-3.1 Oberflächenrauheitszertifikat (optional)
Toleranzen:	Nach ISO 2768-f
Verpackung:	Einfach- oder Doppelverpackung
Option:	Passivieren und/oder Beizen. Weitere Dimensionen auf Anfrage verfügbar
Anmerkung:	Technische Inhalte können verändert werden

Vorteile und Besonderheiten

- Betriebsfertig, single-use oder wiederverwendbar
- Autoklavierbar und gammabestrahlar
- Edelstahl-nadel mit PVDF oder PEEK support
- Geradegerichtete Nadel mit nur einem durchgängigen und medienberührten Material
- Leichte Integration in existierende Abfülllinien oder Abfüllsysteme möglich
- Tropfenfreie Nadeleigenschaft erlaubt akkurates volumetrisches Abfüllen*
- Erlaubt Hochgeschwindigkeitsabfüllung und bottom up Bewegung
- Lasermarkierung möglich, System nachverfolgbar

Vorteile für Single-Use Konfiguration

- Keine Reinigungsverifikation oder Validierung notwendig (CIP/SIP)
- Geringe Umrüstzeiten, daher geringere Maschinenstandzeiten
- Minimierung der Cross-Kontaminationsrisiken
- Vereinfachtes Handling

* Ist abhängig von Anwendung und Abfüllsystem

CONNECTORS VERBINDUNGSTECHNIK AG

Zürcherstrasse 53 / Postfach
CH-8317 Tagelswangen
Switzerland

Tel. +41(0)52 354 68 68
Fax +41(0)52 354 68 60